
Clearblue كليربلو

اختبار الحمل
للاكتشاف السريع

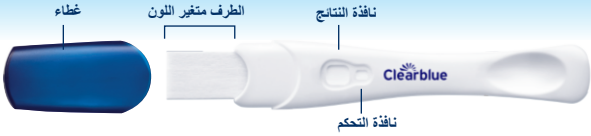

للاختبار الذاتي. يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.

هذا المنتج هو جهاز اختبار ذاتي غير آلي في المنزل للكشف الكيفي عن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) في بول المرأة لتحديد الحمل. مخصص للاستخدام قبل 4 أيام من موعد الدورة الشهرية.

التحذيرات والاحتياطات

إرشادات الجهاز، مع "CB11012" مطبوعة على الغلاف. للاختبار الذاتي في المنزل. للاستخدام التشخيصي في المختبر فقط. غير مخصص للاستخدام الداخلي. تحظر إعادة الاستخدام. حافظي على الاختبار بعيدًا عن متناول الأطفال. يُخزَّن في درجة حرارة تتراوح بين 2 الي 30 درجة مئوية. يُترَك لمدة 30 دقيقة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إجراء الاختبار في حال تخزينه في الثلاجة. لا تستخدميه إذا كان الغلاف المعدني الرقيق تالفًا. استخدميه على الفور بمجرد فتح الغلاف المعدني الرقيق. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية". يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية. يحتوي على أجزاء صغيرة. لا تضعي أي مكون من مكونات هذا الجهاز في فمكِ. إذا ابتلعتِ شيئًا منه عن طريق الخطأ، فاطلبي العناية الطبية. أبلغي Clearblue والهيئة المختصة في الدول الأعضاء بأي إصابة ناجمة عن استخدام هذا المنتج. يُستخدم مرة واحدة فقط.

- **دقة تزيد على 99%** من يوم دورتك الشهرية المتوقعة
- **النتائج سهلة القراءة، إما** + **أو** −
- **لا تشربي كثيرًا من السوائل** قبل الاختبار
- **قراءة النتائج في غضون 10 دقائق** 10 دقائق

1 إجراء الاختبار

المواد المطلوبة لكنها غير متوفرة: وعاء جاف ونظيف وساعة توقيت.
أخرجيه من الغلاف المعدني الرقيق وانزعي الغطاء واستخدميه على الفور.
ضعي الطرف متغير اللون لمدة **5 ثوانٍ:**



مهم: سيتحول الطرف متغير اللون إلى اللون القرنفلي على الفور، ما يدل على أنه يمتص البول، لكن يجب عليك الاستمرار في الاحتفاظ بالطرف في البول لمدة 5 ثوانٍ كاملة.

مهم: اغمري الطرف تمامًا كما هو موضح

أعيدي تركيب الغطاء، واجعلي عصا الاختبار مسطحة. إذا لم يتحول الطرف إلى اللون القرنفلي تمامًا، فراجعي "أخطاء الاختبار".

2 الانتظار

3-1 دقائق

- قد تظهر نتيجة "+" بمعنى حامل في غضون 1 دقيقة عند الاختبار من الدورة الشهرية الفائتة (اليوم التالي لتوقع الدورة الشهرية).
- لكن ينبغي الانتظار 3 دقائق لتأكيد النتيجة التي تعرض رسالة "غير حامل" "-".

إذا لم تظهر أي خطوط زرقاء، فراجعي "أخطاء الاختبار".

3 النتائج

حامل: إذا كانت نتيجتك تشير إلى أنكِ حامل، فاستشيري طبيبك (راجعي السؤال الأول)



غير حامل (راجعي السؤال الثاني)



إذا لم تكوني متأكدة من نتيجتكِ، فراجعي السؤال السادس.

يجب أن يكون الخط الأزرق موجودًا في نافذة التحكم حتى تكون النتيجة صالحة. إذا لم يكن كذلك، فراجعي "أخطاء الاختبار".
مهم! احرصي على قراءة النتيجة في غضون **10 دقائق** من الاختبار. تجاهلي أي تغييرات تطرأ بعد هذا الوقت.

الأسئلة والأجوبة

1 نتيجتي تشير إلى أنني حامل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

استشيري طبيبك وسيتمكن من إرشادك بشأن خطواتك المقبلة. من الممكن أن تحصلي على نتيجة إيجابية وتكتشفين لاحقًا أنك لم تعودي حاملاً (راجعي السؤال السابع).

2 نتيجتي تشير إلى أنني غير حامل. ماذا يعني ذلك؟

قد لا تكونين حاملاً، أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعًا بما يكفي لاكتشافه. عليكِ إجراء الاختبار مرة أخرى في غضون ثلاثة أيام. إذا أعطاك هذا الاختبار نتيجة "غير حامل" وتأخرت دورتك الشهرية، فاستشيري طبيبك.

3 لست متأكدة من الموعد المتوقع للدورة الشهرية المقبلة. كيف أعرف أنني أجري الاختبار في الوقت المناسب؟

لحساب اليوم المتوقع لبداية الدورة الشهرية، احسبي مدة الدورة الشهرية العادية بحساب عدد الأيام بدءًا من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبدء الدورة التالية. إذا كنتِ تمرّين بدورات غير منتظمة، فلا بد أن تُعطي وقتًا بمقدار أطول دورة لكِ في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

4 كيف يعمل Clearblue؟

يكتشف هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية في البول بعد تطبيق العينة. تشير النتائج المرئية إلى ما إذا تم اكتشاف هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية بدقة تزيد على 99% من اليوم الذي تتوقعين فيه دورتك الشهرية.

5 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟

احرصي دومًا على قراءة تعليمات الجهة المصنِّعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء الاختبار.

يمكن أن تسبب الأدوية التي تحتوي على هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) وبعض الظروف الصحية النادرة نتائج إيجابية زائفة. قد يؤدي الحمل خارج الرحم أو الحمل الأخير، حتى إذا لم يكمل دورته، إلى نتائج مضللة. إذا وصلتِ إلى سن اليأس أو اقتربتِ منه، فقد تحصلين على نتيجة حمل زائفة على الرغم من أنكِ غير حامل.

وينبغي ألا تتأثر نتيجة الاختبار بالعلاجات الهرمونية التي تحتوي على الكلوميفين سترات أو مسكنات الألم الشائعة أو الكحول أو المضادات الحيوية أو حبوب منع الحمل. إذا حصلتِ على نتائج غير متوقعة، فسينبغي لكِ مناقشتها مع الطبيب المتابع لحالتك.

6 ماذا أفعل إذا لم أكن متأكدة من النتيجة؟

للتأكد من أن نتيجتك تشير إلى أنك "حامل"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "+" في نافذة النتائج في غضون 10 دقائق من إجراء الاختبار.

نتائج تشير إلى حدوث حمل

الصورة أ: يترجح حدوث هذا الأمر عندما تكونين حاملاً وتجرين الاختبار بعد مرور أكثر من عدة أيام بعد الدورة الشهرية الفائتة حيث تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية مرتفعة.

الصورة ب: قد ترين هذا إذا كنتِ تُجرين الاختبار في اليوم الذي تتوقعين فيه دورتك الشهرية حيث قد تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية منخفضة نسبيًا.

الصورة ج: لا تزال النتيجة تشير إلى حدوث حمل.

ليس من المهم أن يكون أحد الخطين اللذين يشكلان الرمز "+" أفتح أو أغمق من الآخر؛ فالنتيجة هي "حامل".

للتأكد من أن نتيجة اختبارك هي "غير حامل"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "-" (سلبية) في نافذة النتائج في غضون 10 دقائق من إجراء الاختبار.

إذا كنتِ لا تزالين غير متأكدة من نتيجتك، فينبغي الانتظار 3 أيام على الأقل قبل إجراء الاختبار مرة أخرى، مع مراعاة اتباع التعليمات.

7 أجريت اختبارًا سابقًا، وكانت النتيجة "حامل"، ثم أجريت اختبارًا آخر وكانت النتيجة "غير حامل" أو أن الدورة قد بدأت. ماذا يعني ذلك؟

من الممكن أن تحصلي على نتيجة إيجابية وتكتشفين لاحقًا أنك لم تعودي حاملاً. قد يرجع ذلك إلى الفقدان المبكر للحمل، وهو أمر شائع؛ حيث يؤثر في نحو حالة حمل واحدة من كل 4 حالات حمل. يمكن لمعظم النساء أن تحصل في ما بعد على حمل صحي.

8 هل هناك أي شيء يجب أن أفعله إذا كنت أخطط للحمل؟

من الجيد التحدث إلى طبيبك قبل محاولة الحمل. ينصح عديد من الأطباء ببعض الخطوات التي قد تكون مفيدة مثل تناول مكملات حمض الفوليك أو فيتامينات ما قبل الولادة، وتجنب الكحول، والإقلاع عن التدخين، ومحاولة الحفاظ على وزن صحي. قد ترغبين أيضًا في التفكير في استخدام اختبار التبويض لتحديد أكثر أيامك خصوبة. تقدم Clearblue مجموعة من اختبارات التبويض للمساعدة على زيادة فرصك في الحمل.

أخطاء بالاختبار

لم يتحول الطرف متغير اللون إلى اللون القرنفلي تمامًا.

ربما لم تستخدمي كمية كافية من البول. مع ذلك، يمكنك التأكد من نجاح الاختبار إذا ظهر خط التحكم في غضون 10 دقائق من الاختبار.

لا يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من الاختبار.

لم ينجح الاختبار، ربما بسبب استخدام كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من البول. حاولي مرة أخرى باستخدام اختبار جديد، مع اتباع التعليمات بعناية.



www.clearblue.com

خصائص الأداء

الأداء السريري:

أظهر اختبار الأداء السريري أن دقة الجهاز أكثر من 99% في تحديد حالة الحمل من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.

- كانت دقة الجهاز > 99% في أيدي المستخدمين العاديين عند مقارنتها بحالة الحمل (تم اختبارها بواسطة 120 امرأة).
- في دراسة شهدت اختبار 600 عينة، كانت دقة الجهاز أكثر من 99% من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.
- أكد اختبار الخصوصية السريري مع عينات قبل انقطاع الطمث وفي فترته وما بعده (600 عينة) أن درجة الخصوصية أكبر من 99% أو تساويها.

الأداء التحليلي:

تم تحديد الخصوصية التحليلية عبر اختبار الجهاز مع المواد التي يحتمل أن تتداخل أو تتفاعل. أكدت النتائج أن التركيزات العالية من المادة ذاتها لا تؤثر في أداء الجهاز. كذلك أجزاء بيتا من هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية، أو المستويات العالية جدًا من هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية غير المعدل، أو مجموعة من الجاذبية النوعية، أو درجة حموضة البول. أظهرت دراسة دقيقة أن الحساسية التحليلية للجهاز هي 25 ميلي وحدة دولية/مل.

LOT	كود الدفعة	IVD	جهاز طبي للتشخيص في المختبر
	يستخدم قبل تاريخ		الجهة المصنِّعة
2°C 30°C	حد درجة الحرارة من 2 إلى 30 درجة مئوية		تحظر إعادة الاستخدام
EC REP	ممثل معتمد لدى دول أوروبا		

المطبوعات

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

في ما يخص الاستفسارات عن المنتج، يرجى الاتصال بدعم العملاء على العنوان أدناه:-

الجهة الحاصلة على ترخيص السوق:
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
جنيف، سويسرا.
موقع التصنيع: Abbott Diagnostics (Shanghai) Co. Ltd.
شنغهاي، الصين

Clearblue علامة مسجلة لشركة SPD.
حقوق النشر © لعام 2026 لصالح SPD. جميع الحقوق محفوظة.

CE 0123

2300709.0110-2026